

M201

妊婦体験スーツ プレマミー



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (260602)

— I N D E X —

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 取扱上の注意／保管方法 3
- 使用手順 4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



右のQR コードから弊社HP の製品紹介ページを見ることができます



はじめに

この度は弊社商品 妊婦体験スーツ プレマミー をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3
使用手順	4

目的

妊婦の状態を体験する。

内容

- | | | | |
|---|--------|-----|-----------------------------|
| 1 | 本体 | 1 体 | |
| 2 | 胸部おもり袋 | 2 個 | (形状保持用スポンジ、750g のおもり 2 個含む) |
| | 腹部おもり袋 | 1 個 | (形状保持用スポンジ、750g のおもり 8 個含む) |
| 3 | 収納袋 | 1 個 | |



1



2



3

取扱上の注意

- 1 体験学習は必ず援助者の介助のもとに2人以上が一緒になり行ってください。
- 2 道路上や段差のある場所では歩行の際、転倒に注意してください。
また、物を落としたりする危険もあります、十分注意してください。
- 3 すべてのおもりを装着すると約9kgになります。
装着する場合は、無理のない重量に調整して使用ください。
- 4 本体は手洗い可能ですが、本体内側にあるタグをご覧になり、指示に従ってください。
- 5 洗濯回数によっては、ファスナーなどがもろくなることがあります。ご了承ください。
- 6 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 7 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 8 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 本体は洗濯可能ですが、本体内側にあるタグをご覧になり、指示に従ってください。
- 2 本体は折りたたみ、収納袋に収納してください。
- 3 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

使用手順

必ず援助者の介助のもとに2人以上が一緒になり行ってください。

- 1 肩ベルトを両肩にかけてください。
- 2 腰部ベルトを体格に合わせて調整し装着します。
- 3 胸部ベルトを体格に合わせて調整し装着します。



- 4 胸部と腹部のおもりを任意の重量にします。
おもり 1 個約 750g です。(腹部に 8 個、胸部に 2 個)



装着完了



エプロン (別売) 装着時

株式会社坂本モデル



本社

〒606-0865
京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場

〒562-0035
大阪府箕面市船場東1-9-29

M201

Pregnancy Experience Suit



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

User's Manual (260602)

— I N D E X —

● Introduction / Table of Contents	1
● Purpose / Contents	2
● Cautions on use / Storage Instructions	3
● Instructions for Use	4

!
Note

Please open your parcel and check the main unit and accessories of the product immediately upon receipt. If the products are delivered damaged or with parts missing, please contact our company or the distributor.

株式会社坂本モデル



Scan this QRcode with your device to see our homepage.



Introduction

Thank you for purchasing our product, “Pregnancy Experience Suit”.
Read this user’s manuals carefully in order to use the product for a long
time appropriately.

This product is closely checked before factory shipment. However, when
this product arrives, open it soon, and check if anything on the main unit
and accessories are missing or broken.

Table of Contents

Introduction／Table of Contents.....	1
Purpose／Content.....	2
Cautions on use／Storage Instructions.....	3
Instructions for use.....	4

Purpose

This suit is used simulate pregnancy

Contents

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Pregnancy simulation unit | Qty.1 |
| 2 | Chest weight bag
(Includes shape-holding sponge and 750g weight x2) | Qty.2 |
| | Stomach weight bag
(Includes shape-holding sponge and 750g weight x8) | Qty.1 |
| 3 | Storage bag | Qty.1 |



1



2



3

Cautions on use

- 1 When training and simulating the experience of pregnancy, always carry out the training with at least two assistants or supporting staff.
- 2 Be careful not to fall down when walking on roads or uneven surfaces.
In addition, the person simulating the experience of pregnancy may also accidentally drop objects and therefore should exercise caution.
- 3 Approx. 9kg when all weights are fitted
When fitting, adjust to a weight which is possible to bear.
- 4 The simulation suit is washable by hand. Be sure to look at the tag inside the suit and follow the instructions.
- 5 Note that the fasteners, etc., may become brittle after washing the suit multiple times.
- 6 If a defect or problem with the product is discovered during use, stop using the product immediately and contact Sakamoto Model or an authorized dealer.
- 7 This product is a simulator capable of supporting advanced medical training. However, Sakamoto Model does not guarantee the same results during actual treatment.
- 8 Please note that the specifications of this product may be changed without prior notice in order to make improvements to the product.


Storage Instructions

- 1 The simulation suit is washable by hand. Be sure to look at the tag inside the suit and follow the instructions.
- 2 Fold up the pregnancy suit and place it into the storage bag
- 3 Avoid storing the product in direct sunlight or in locations with high temperature and humidity.

Instructions for Use

Always carry out the training with at least two assistants or supporting staff.

- 1 Place the shoulder belt onto your shoulders.
- 2 Attach the waist belt and adjust it to fit your body shape.
- 3 Attach the chest belt and adjust it to fit your body shape.

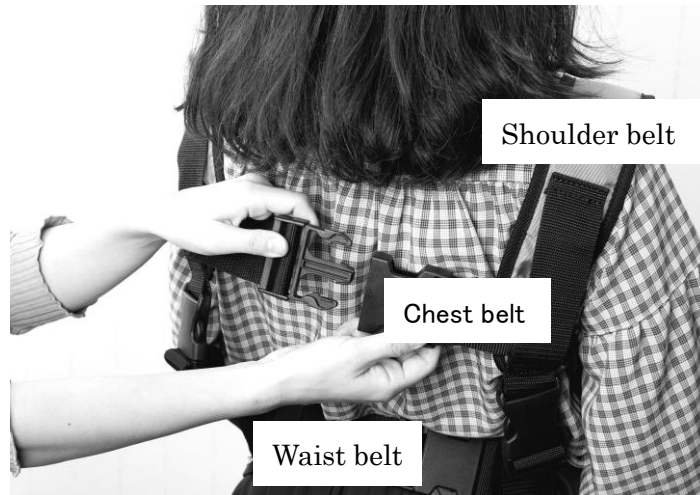

- 4 Adjust the weights around the chest and waist as desired

Each weight weighs approximately 750g.

(There are 8 waist weights and 2 chest weights.)



When fully fitted



When apron (sold separately) is worn

SAKAMOTO MODEL
C O R P O R A T I O N

Head office

34,Higashitakagicho,Shimogamo
Sakyo-ku, KYOTO 606-0865, JAPAN

Phone: +81-75-701-1135

Fax: +81-75-722-5638

E-mail:info@sakamoto-model.com

URL:http://sakamoto-model.co.jp

Overseas Sales Department

1-9-29,Senbahigashi,Minoh City,Osaka
562-0035,JAPAN

Phone: +81-72-729-8350

Fax: +81-72-729-8385

E-mail:trade@sakamoto-model.com