

Z102 サカモトマイクロチップ装着トレーナー

【取り扱い説明書】


サカモトマイクロチップ装着トレーナー をお買い上げいただきありがとうございます。この取り扱い説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項と取り扱い方を記載しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。ご購入後、すみやかに内容物をご確認いただき、万一不足や破損がありましたら弊社までご連絡ください。

【取扱上の注意】

- 1 表皮にボールペンやマジックなどの汚れが付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 2 本体を落下させると、破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 3 製品を使用中に異常がある場合、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 4 本製品は高度な訓練を実現するシミュレーターですが、実際の処置において同様の効果を保証するものではありません。また本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【お手入れ・保管】

- 1 表面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤かアルコールを布にふくませてふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナー、溶剤は使用しないでください。
- 2 直射日光が当たらないようにしてください。高温になる場所、湿気・ほこりの多い場所では保管しないでください。
- 3 表皮に針跡が多くなり、トレーニングに支障がある場合、交換用表皮をご購入下さり、以下の画像のように交換してください。

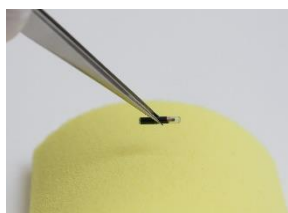

ダミーのマイクロチップ



筋肉部のスポンジのセット



表皮の装着や交換

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865
	京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

Z102 Sakamoto microchip insertion trainer

【User's Manual】

Thank you for purchasing our product, “Sakamoto microchip insertion trainer”.

Read this user's manual carefully in order to use the product for a long time appropriately.


This product is closely checked before factory shipment. However, when this product arrives, open it soon, and check if anything on the main unit and accessories are missing or broken.

【Cautions on Use】

- 1 Be careful with ballpoint pens and magic markers because their marks cannot be removed.
- 2 Take extra care when handling the product because it is fragile and will break if dropped.
- 3 If a defect or problem with the product is discovered during use, stop using the product immediately and contact Sakamoto Model or an authorized dealer.
- 4 This product is a simulator capable of supporting advanced medical training. However, Sakamoto Model does not guarantee the same results during actual treatment. Please note that the specifications of this product may be changed without prior notice in order to make improvements to the product.

【Storage Instructions】

- 1 If the product gets dirty, use a soft cloth to remove the dirt or stain. For severe stains, use a neutral detergent diluted with water. Wipe it off using a cloth dampened with a disinfectant or alcohol and finish with a dry cloth. Do not use solvents such as benzine, thinner.
- 2 Avoid storing the product in direct sunlight or in locations with high temperature and humidity.
- 3 If there are many needle marks on the epidermis and it is interfering with training, please purchase a replacement epidermis and replace it as shown in the image below.

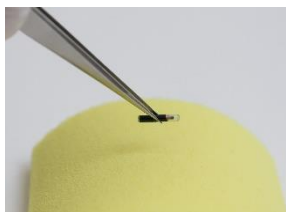

Dummy microchip



Muscle sponge set



Attaching or replacing
the epidermis



URL <https://sakamoto-model.com>

E-Mail trade@sakamoto-model.com