

M152-1

殿筋注射説明模型 Type II

実用
新案

- 重量/約7kg
- ケースサイズ/W41×D47×H36cm
- 付属品/排液バッグ、側臥位用台座、注射部位確認カバー、収納ケース
- 監修・指導/椋山女学園大学 佐藤好恵

四分三分法・クラークの点・ホッホシュテッターの部位の3つに対応 中殿筋までの深さも判定



特 長

- 1 表皮部分には骨盤が組み込まれています。




- 2 赤ランプの点滅表示やブザーの警告音で間違った部位を知らせます。安全部位への刺入は緑ランプで知らせます。



実 習

3つの部位への注射に対応しています。

四分三分法
クラークの点
ホッホシュテッターの部位

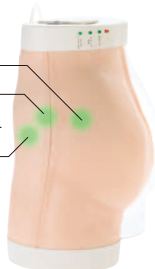

水(水道水のみ)の注入が可能です。



正しい注射部位の実習ができます。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com