


AM-2

刺鍼トレーニングパッド (ランプ、チャイム音判定付き)

- 重量/約0.3kg ●ケースサイズ/W22×D12×H8cm
- 付属品/装着用ベルト、輪ゴム、収納ケース

深度の異なる2つのターゲットで 難易度別に練習可能

本製品は、ターゲットへの到達を正確に感知するセンサーを搭載し、正誤をランプ及びチャイム音で表示。成功体験を積み重ねることで、自信を深める効果もあります。

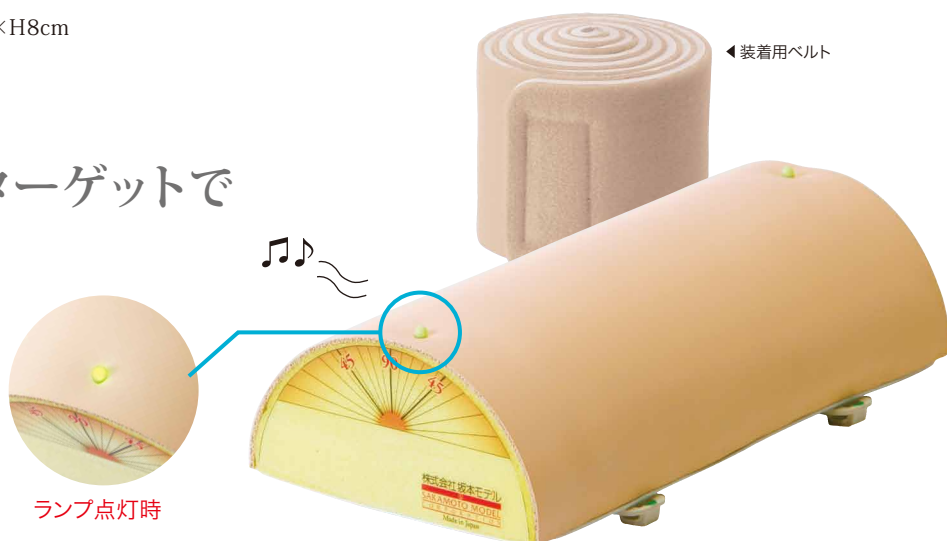


実習

1 難易度別の実習

2つのターゲットを設けており、難易度を変えた刺入練習が可能です。正しく鍼が届いたことを知らせる正誤判定ランプ・チャイム音付きで、立体的な感覚をイメージすることができます。

●浅いターゲットへの刺入

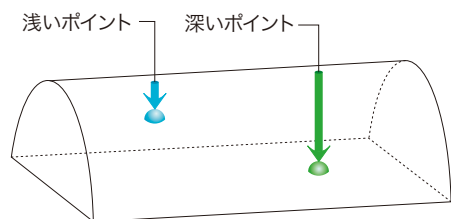

<別売 M182 装着用腕 >

●深いターゲットへの刺入



◀サイドのフックに輪ゴムをかけることにより、位置が限定されターゲットが見つかりやすくなります。

●ランプ・チャイム音判定

ターゲットに刺鍼できると緑ランプ点灯及びチャイム音で“成功”を知らせます。(ターゲットから外れている場合ランプは点灯せず、チャイム音も鳴りません。)鍼の到達を感知するセンサーは半球型で、直刺はもちろん、斜刺も正しく判定します。

2 装着しての実習

付属の装着用ベルトで好きな部位に装着することが可能。二人一組の実習で、実際の体位をとりながら刺鍼練習ができます。動きのある“患者役”を相手に、より実践的な実習が可能です。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com