

# M100-2

## 清子さん


<別売かつら、男性生殖器>

●付属品/寝衣

### 実際に入浴可能な全身モデル

●腰部はスムーズに前後屈曲します。車椅子に座らせるといった介護も実際の患者と同じ感覚でシミュレーションできます。

●頭部は前後に動かせるほか、左右にも各30度の角度で曲がり、人体とほぼ同様の姿勢を取ることができます。

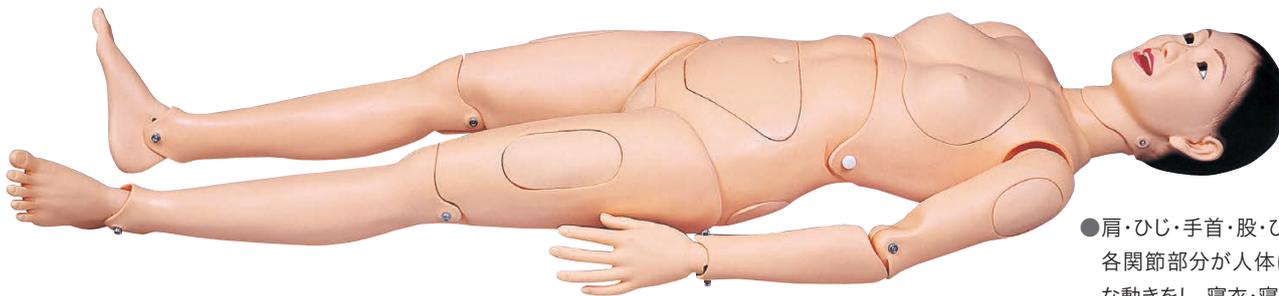

●下肢の前後・外転運動が自在、股間が充分に開きます。便器・尿器を用いた排泄援助の実習もリアルに行えます。

●肩・ひじ・手首・股・ひざ・足首の各関節部分が人体に近い自然な動きをし、寝衣・寝具の交換などの実習もスムーズに運びます。

●水中に入れやすいよう体のなかへ自然に水が入り、引き上げるとすみやかに排水されます。

●シャワー、スポンジ、洗剤使用も可能です。

●体の動きがスムーズです。

### 実習

水中に入れると自然に水が入るため浮き上がることがなく、入浴実習などもたいへんスムーズです。引き上げると排水します。塩化ビニール製で、シャワー、スポンジ、洗剤も自在に使用できます。



### 規格

身長	160cm
体重	約13kg
材質	塩化ビニール

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)