


# M167

## サカモト気道管理トレーナー

- 重量/約14kg ●ケースサイズ/W83×D52×H29cm
- 付属品/交換用前歯3ヶ、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納ケース
- 監修/気道確保教育プログラム研究会 村島浩二(九州厚生年金病院麻酔科)

生体に近い感覚で、実践的な訓練が可能

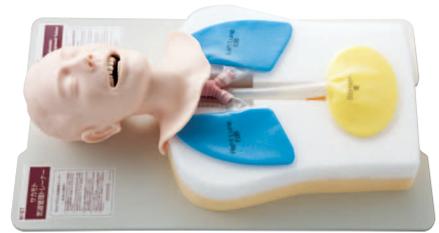

内部の構造▲

### 交換用パーツ

交換用前歯3ヶ一組

### 特長

#### 1 リアルな実習が可能



- 気管内チューブによる経口、経鼻両方の気管挿管の技術の習得が可能です。
- 上気道エアウェイ(ラリングルマスク、食道閉鎖式エアウェイなど)の技術の習得が可能です。
- 舌・喉頭蓋・咽頭が正確に再現されています。
- 舌・口がやわらかいため、生体に近い形の喉頭鏡の使用法や気道確保の実習が行えます。

#### 2 前歯の破損



喉頭鏡使用時に歯を支点として誤った方法で歯に力が加わると前歯(上の前歯4本)が破損する仕掛けになっています。(前歯のパーツは交換可能)

#### 3 聴診器で左右の送気音の確認が可能



- 片肺送気が確認できます。
- 食道内への誤送気の確認ができます。

#### 4 誤送気の確認が可能



正確に挿管し送気されると、左右胸部が挙上することで、確認ができます。

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)