


M206

問診トレーナー“問診”さん

- 身長／160cm ● 重量／約 17kg
- 内容品／問診さん本体・タブレット端末・専用音声送信セット・専用録画機能付きカメラ× 2 ・寝衣・ベビーパウダー・I.V.Pad×1ヶ

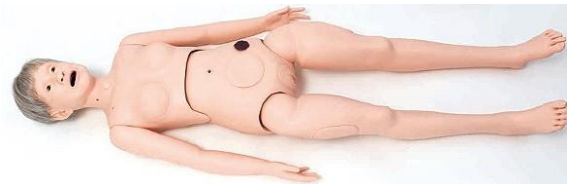

特 長



1 模擬患者機能

インストラクターが発する声は患者さんの声として問診さん本体より聞こえます。

また、生徒さんが発した声がインストラクターへ届きますので、遠隔操作での対話、問診のトレーニングが可能です。



2 レコーディング機能

問診さん主観視点カメラ、任意の場所に設置できる客観視点カメラを用いて撮影している画像はタブレットで確認できます。

また、動画を録画し、行ったトレーニングをグループミーティング等に活用することができます。



3 実習モデル人形機能

問診さん本体の材質は人肌に近いシリコン製です。

実際の人間の肌に触れる感触で、医療手技トレーニングを行えます。（注射訓練、ポジショニング、移乗操作 etc）

座位をとることもでき、各関節も曲がり、保持できます。弊社製装着型タイプのタスクトレーナーを装着し手技時の対応、患者反応等のシナリオ作りに活用できます

M101-5

モデル人形用収納バッグ 1体用

モデル人形の持ち運びに便利な収納バッグです。



M101-9

モデル人形用格納ケース 3体用

下部に備品収納スペースを備え、人形に無理のかからないスペース配置になっています。ロールスクリーン、キャスター付き



M103-1

モデル人形専用ストレッチャー



株式会社坂本モデル

電話番号:075-701-1135
FAX 番号:075-722-5638
URL: www.sakamoto-model.co.jp